



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.



neXus 3

Reconditioning Manual/Rekonditioneringsanvisning/
Manuel de maintenance



Content

Reconditioning Manual (EN)	3
Maintenance, inspection and testing	3
Warnings and recommendations	5
Exploded view	6
Spare Parts	7
Rekonditioneringsanvisning (SV)	10
Underhåll, inspektion och test	10
Varningar och rekommendationer	12
Sprängskiss	13
Reservdelar	14
Manual de maintenance (FR)	17
Entretien, inspection et essais	17
Avertissements et recommandations	19
Vue éclaté	20
Pièces de rechange	21

Maintenance, inspection and testing

EN

To ensure that your walking aid is functioning properly and safely, an annual inspection should be done only by an authorized agent. The following maintenance should be done regularly:

○ **Cleaning**

Regular cleaning with a mild liquid detergent or wiping with a damp cloth is recommended. **DO NOT** use any toxic cleaning materials, chlorine bleach or abrasive cleansers on the product as it will damage it. **DO NOT** pressure wash.

○ **Post treatment**

Lubricate any moving parts. Ensure the rollator is free of residue moisture to avoid rusting its components. **DO NOT** keep near a heat source.

○ **Chassis**

Check the weldings for any visible signs of damage. Should damage be evident, cease usage and immediately have the rollator inspected. Replace if necessary.

○ **Finish**

The rollator is painted and sealed for a superior finish, however scratches can occur with impact. Scratches in the frame may result in corrosion.

○ **Corrosive components**

The rollator does contain components that may rust if left in a moisture setting. Periodically check all welding points and screws. It is recommended that an authorized agent perform this inspection. If corrosion is present,

replace parts. If corrosion is extensive, replace rollator.

○ **Periodic inspections**

At minimum, it is recommended that an authorized agent perform an annual inspection of the rollator and its components to ensure it is functioning as intended. Do not use the rollator if any components are damaged or inoperable. Have an authorized agent perform necessary repair and/or replacement.

○ **Handle grip**

Periodic replacement of the handle grip may be necessary with usage. Replace as required.

○ **Braking system**

The brakes should function in both the control and park position. The handle should stay in the “locked” position when pushed down and easily move up when “squeezed” towards the grip. Should these control functions not operate as intended, cease usage and immediately have the rollator repaired.

○ **Height adjustment**

Control function. Check star handle to ensure it is securely fastened.

○ **CE-marking**

Ensure that the CE-marking is present and legible.

☐ **Folding mechanism**

Control function

☐ **Wheels**

Ensure the wheels are not worn out and spin easily to ensure proper movement of the rollator. If any noise is heard, have an authorized agent inspect product.

☐ **Seat**

Periodically check to ensure that the seat mechanism and screws are firmly in place. If any components are not secure, do not sit on the rollator and have it inspected for repair immediately. If used, ensure the seat pad is properly mounted in the seat place for maximum comfort.

☐ **Stability**

The wheels should all rest firmly on the ground and that there should be no distortion of the frame.

☐ **Walking Test**

Before using your rollator, take a small walk with it to ensure it is properly functioning.

Authorized Dealer/Service Agent

Last Service Date

Intended use

This rollator was designed to act as a support device while walking or as a resting seat while stationary and locked into position. It should never be used as a transport device. Never attempt to alter the rollator in any way.

Note!

Reconditioning must be done only by an authorized agent. If incorrectly performed by an unauthorized individual, it could result in an accident/injury.

To locate an authorized agent, contact your local office:

Europe: info.se@humancaregroup.com
Canada: info.ca@humancaregroup.com
United States: info.us@humancaregroup.com
Australia: info.au@humancaregroup.com
Netherlands: info.nl@humancaregroup.com

When exchanging parts on the rollator, use only Human Care authorized parts to ensure continued CE-validation.

If corrosion is more than a film of rust, discard and recycle rollator according to local regulations.

Never use this rollator in any way other than for its intended purpose.

It is strongly recommended that a therapist or doctor assess your needs prior to using this product.

Inspect your rollator frequently prior to usage to ensure there is no damage or wear.

User must not exceed this product's weight capacity!


NeXus 3

200kg/441lb

NeXus 3 Wide

250kg/551lb

Note: Reconditioning guidelines may vary from country to country. Ensure that any reconditioning performed follows local regulations.

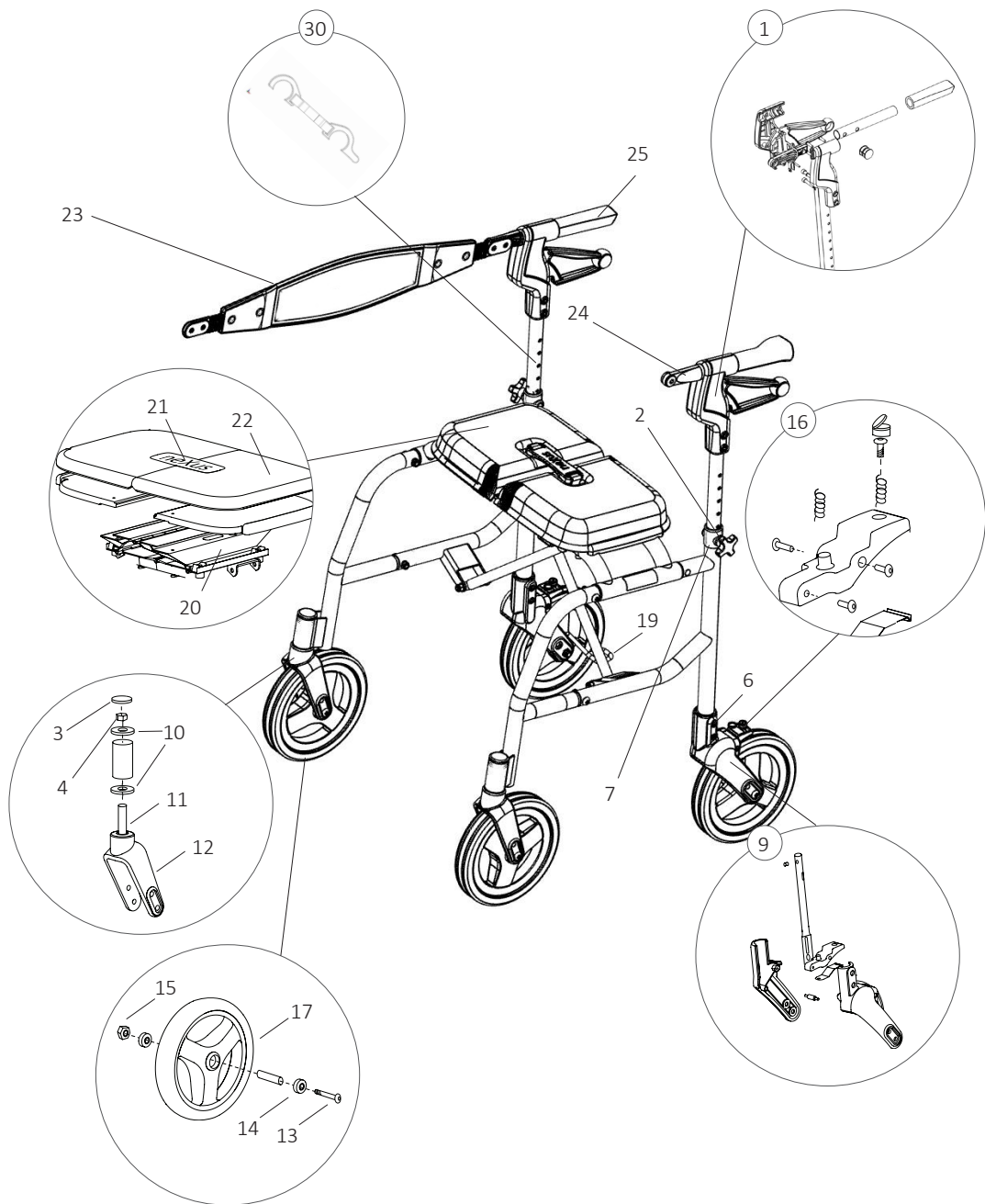

No	Designation (Qty/Rollator)	UofM	Art. no	Additional Instructions
1	Brake Handle Complete (1 required/ea) Right - Red Ball Left- Red Ball	EA	93243 93201	Standard with rollator
	Brake Handle Complete Short (1 required) Right - Red Ball Left- Red Ball	EA	93245 93244	Optional
2	Star Handle and Bolt (2 required) Star Handle (Wing Nut) Bolt	EA	89096	For models after 2009
3	Bolt Cap	EA	4823	
4	Front Fork Stem Nut	EA	H48025	
5	Rear Fork Tubing Nut	EA	H48031	
6	Rear Fork Tubing Screw	EA	H48030	
7	Adjustment collar	EA	P45004	
9	Rear Fork Assembly (2 required) Left- Super Low Left- Low Left - Standard Right- Super Low Right- Low Right- Standard	EA	AS48013 AS48015 AS48017 AS48014 AS48016 AS48018	Includes inner/outer fork, lower brake rod assembly, brake pad complete and cap)
10	Front Fork Bearing (2 required/fork)	EA	H48026	
11	Front Fork Stem Bolt	EA	H48024	
12	Front Fork	EA	4825	
13	Axle Bolt	EA	H48020	
14	Wheel Bearing (2 required/wheel)	EA	H48022	
15	Axle Nut	EA	H48021	
16	Brake Pad Complete (2 required) Hex Adjustment Screw Brake Pad Spring Pivot Sleeve Screws (2) Brass Pivot Screw Adjustment Screw Lever Spring Lever Brass Lug	EA	76011	
17	Wheel Complete, grey (4 required) Wheel Bearings (2/wheel) Bearing Spacer	EA	93282-01	
17	Wheel Complete, black (4 required) Wheel Bearings (2/wheel) Bearing Spacer	EA	93282-02	

18	Plastic Cap Screw Cover (Rear Fork)	EA	H45003	
19	Curb Climber	EA	93315	
20	Folding Seat Mechanism	EA	P45007	
21	Seat Handle Red	EA	P45008	
22	Seat Pad Set (2 pc)	EA	93263	
23	Backstrap Complete Backstrap Backstrap Clamp Screw Backstrap Clamp Nut	EA	90391*	*For neXus 3 Wide the article number is 94404.
24	Backstrap Clamp Left Right	EA	4880 4881	
25	Handle Grip	EA	20-024	
26	Wire Basket (not shown)	EA	4510	
27	Replacement Soft Bag Bracket Kit	EA	90276	Included with soft bag
28	Soft Zippered Bag Complete	EA	93280*	Standard with rollator. *For neXus 3 Wide use the article number: 94405
30	Locking Snap		73004	

For 4600 models:

No	Designation (Qty/Rollator)	UofM	Art. no	Additional Instructions
	Brake Handle Complete Right (1 required) Regular Tall	EA	P48535 P48555	
	Brake Handle Complete Left (1 required) Regular Tall	EA	P48545 P48565	
	Lower Brake Rod Assembly (2 required) Left- Super Low Left- Low Left - Standard Right- Super Low Right- Low Right- Standard	EA	76013 76016 76018 76015 76017 76019	

Underhåll, inspektion och test

SV

För att säkerställa att ditt gånghjälpmedel fungerar korrekt och säkert ska ett behörigt ombud genomföra en årlig inspektion. Följande underhåll ska utföras regelbundet:

○ Rengöring & service

Vid rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt 60°C i 10 min kan användas, torkning max 70°C i 10 min, observera efterbehandlingskraven. Undvik att spola med tryck mot lager (hjul, framgafflar). **OBS: Använd inte lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.** Desinfektion utförs av behörig personal med lämplig skyddsutrustning och enligt desinfektionsmedelstillverkarens instruktioner. Vid rengöring använd en svamp eller mjuk trasa som inte repar produkten. Använd ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70-80% etanol. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel, klor eller fenom. Vid frågor om desinfektion eller lämpliga desinfektionsmedel kontakta Human Care.

Obs! Använd INTE förtunningsmedel, bensin eller andra lösningsmedel.

○ Efterbehandling

Efter tvätt ska alla anslutningar, trånga utrymmen och dräneringshål torkas med hårtork och sprayas med tunn olja. Om avfettningsmedel används ska de rörliga delarna smörjas.

○ Lacken

Kontrollera om det finns lackskador.

○ Rörram

Kontrollera svetsfogar och att skruvar

är åtdragna. Om det förekommer omfattande korrosion ska rollatorn bytas ut.

○ Periodiska inspektioner

Vi rekommenderar att en auktoriserad agent årligen utför minst en inspektion av rollatorn och dess komponenter för att säkerställa att den fungerar som avsett. Använd inte rollatorn om några komponenter är skadade eller icke fungerande. Låt en auktoriserad agent utföra nödvändig reparation och / eller återställelse.

○ Handtag

Måste vara fastsatt. Kontrollera att handtagsstången kan tryckas ned mot chassit. Byt ut handtagsgreppet vid behov.

○ Bromsar

Kontrollera att både bromsar och parkeringsbromsar fungerar. Kablarna ska vara hela.

○ Höjdjustering

Kontrollera funktionen.

○ CE-märkning

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och gå till att läsa.

○ Reflexer

Kontrollera att reflexerna finns kvar och är synliga.

- ☐ **Hjul**
Kontrollera att hjulen inte är utslitna och snurrar lätt utan att avge ljud.
- ☐ **Framgafflar**
Kontrollera att kullagret sitter ordentligt fast och att gafflarna lätt kan svängas. Tröghet i framgaffeln kan justeras genom att låsmuttern dras åt eller lossas.
- ☐ **Hopfällningsmekanism**
Kontrollera funktionen
- ☐ **Sits**
Kontrollera att sitsen sitter på plats, att skruvarna är åtdragna och sitsdynan är ordentligt monterad.
- ☐ **Stabilitet**
Kontrollera att alla hjul står stabilt på marken och att det inte finns någon deformation i chassit.
- ☐ **Testkörning**
Gör en sista kontroll genom att testköra.

Auktoriserad återförsäljare/serviceagent

Senaste servicedatum

Avsedd användning

Rollatorn ska endast användas som stöd vid gång eller som sittplats när den står stilla. Ändra inte rollatorn själv.

Notera!

Rekonditionering får endast utföras av en auktoriserad agent. Om rekonditioneringen utförs felaktigt av en obehörig individ kan det leda till en olycka/skada.

För att hitta en auktoriserad agent, kontakta ditt lokala kontor:

Europa: info.se@humancaregroup.com

Kanada: info.ca@humancaregroup.com

USA: info.us@humancaregroup.com

Australien: info.au@humancaregroup.com

Nederländerna: info.nl@humancaregroup.com

Obs! Renovering måste utföras av en person som har goda kunskaper om hur jobbet ska genomföras. En felaktigt utförd renovering kan leda till en olycka/incident. Kontakta alltid din återförsäljare. När du byter ut delar av rollatorn ska du endast använda Human Care-delar för att garantera fortsatt CE-validering. Om korrosionen är mer än en film av rost ska rollatorn kasseras och lämnas in för återvinning.


Användaren får inte överskrida produktens viktkapacitet!

NeXus 3

200kg/441lb

NeXus 3 Bred

250kg/551lb

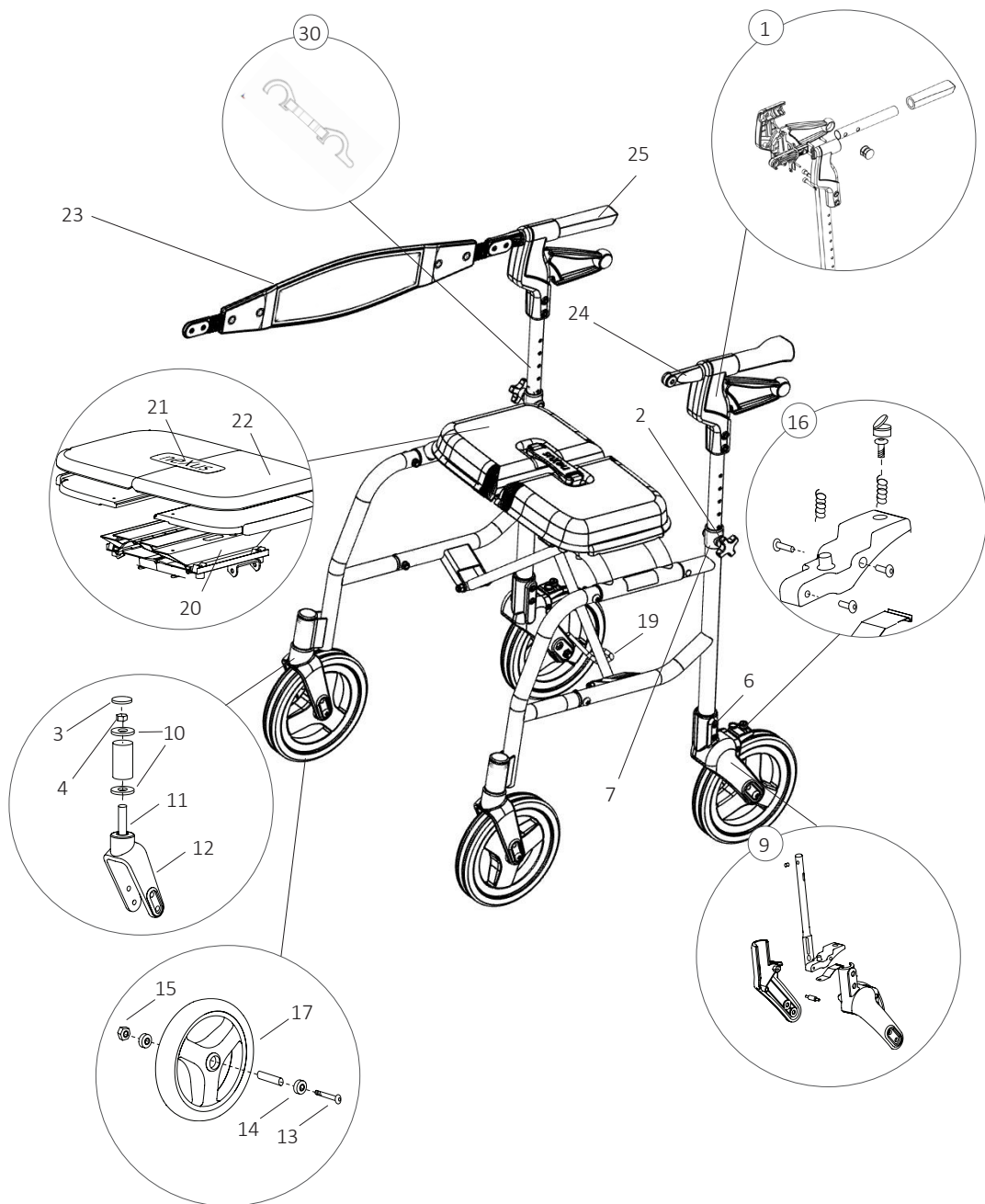

Nr	Beskrivning (Antal/Rollatorn)	Mått.	Art. no	Övrig information
1	Bromshandtag, komplett Höger- med röd boll Vänster- med röd boll	1	93243 93201	Grundutförande
	Bromshandtag, komplett (kort) Höger- med röd boll Vänster- med röd boll	1	93245 93244	Tillval
2	Stjärnvred och bult, kit Stjärnvred Bult	2	89096	För modeller tillverkade efter 2009
3	Bultlock	1	4823	
4	Framgaffelmutter	1	H48025	
5	Bakgaffelmutter	1	H48031	
6	Rörskruv bakgaffel	1	H48030	
7	Justeringskrage	1	P45004	
9	Bakgaffel, komplett Höger- Superläg Höger- Låg Höger - Standard Vänster- Superläg Vänster- Låg Vänster- Standard	2	AS48013 AS48015 AS48017 AS48014 AS48016 AS48018	Innefattar inre och yttre gaffel, nedre bromstag och bromsmekanism
10	Lager framgaffel	2	H48026	
11	Bult framgaffel	1	H48024	
12	Framgaffel	1	4825	
13	Hjulbult	1	H48020	
14	Hjullager	2	H48022	
15	Hjulumutter	1	H48021	

16	Bromsbelägg komplett Justerskruv, broms, Returfjäder, broms Bromsaxelskruv (2) Bromsaxel Skruv Justeringskruv Fjäder till bromshandtag Bromshandtag Mässingsfläns	2	76011	
17	Hjul komplett, grå Hjul Hjullager (2/hjul) Distanser	4	93282-01	
17	Hjul komplett, svart Hjul Hjullager (2/hjul) Distanser	4	93282-02	
18	Skruvlock (Bakgaffel)	1	H45003	
19	Steghjälp	1	4879	
20	Hopfällningsmekanism (sits)	1	P45007	
21	Sitshandtag Röd	1	P45008	
22	Sittdyna (2 pc)	1	93263	
23	Ryggband, komplett Ryggband Skruv till ryggbandsfäste Mutter till ryggbandsfäste	1	90391*	*För neXus 3 Bred är artikelnumret 94404.
24	Ryggbandsfäste Höger Vänster	1	4880 4881	
25	Handtag	1	20-024	
26	Hård korg (inte visad)	1	4510	
27	Monteringskit mjuk korg	1	90276	Inkl metallfästen och klämmor
28	Den mjuka korgen, komplett	1	93280*	Grundutförande *För neXus 3 Bred använd artikelnummer: 94405
29	Den mjuka korgen, komplett	1	93281	
30	Fällningslås		73004	

For 4600 models:

Nr	Beskrivning (Antal/Rollatorn)	Mått.	Art. no	Övrig information
	Bromshandtag höger, komplett Regular Tall	1	P48535 P48555	
	Bromshandtag vänster, komplett Regular Tall	1	P48545 P48565	
	Nedre låsrörkit Höger- Superlåg Höger- Låg Höger - Standard Vänster- Superlåg Vänster - Låg Vänster - Standard	2	76013 76016 76018 76015 76017 76019	

Entretien, inspection et essais

FR

Pour garantir le fonctionnement correct et en toute sécurité de votre déambulateur, une inspection annuelle doit être effectuée par un agent autorisé. Les mesures de maintenance suivantes doivent être réalisées régulièrement:

○ Nettoyage

Un nettoyage régulier avec un détergent liquide doux ou un chiffon humide est recommandé. NE PAS UTILISER de produits de nettoyage toxiques, d'agent de blanchiment chloré ou de nettoyeurs abrasifs sur le produit, car ceci pourrait l'endommager. NE PAS laver sous pression.

Remarque! Ne pas utiliser de diluant, essence ni autres solvants.

○ Après traitement

Si le nettoyage doit être effectué dans un environnement industriel, assurez-vous que toutes les connexions, les espaces et les cavités sont entièrement secs avant utilisation. Lubrifiez toutes les pièces mobiles. Pour le nettoyage à la maison (essuyage avec un chiffon humide), assurez-vous que le déambulateur soit exempt d'humidité résiduelle afin d'éviter la rouille de ses composants.

○ Fini

Le déambulateur est peint et scellé pour un fini de qualité supérieure, mais des rayures peuvent être causées lors d'impact. Les rayures sur le châssis peuvent entraîner la corrosion.

○ Composantes à risque de corrosion

Le déambulateur contient des composantes susceptibles de rouiller si elles sont laissées à l'humidité. Vérifiez périodiquement les points de soudure et les vis. Il est recommandé que cette inspection soit effectuée par un agent autorisé. En présence de corrosion, remplacez les pièces. Si la corrosion est importante, remplacez le déambulateur.

○ Inspections périodiques

Il est recommandé qu'un agent autorisé effectue, au minimum, une inspection annuelle du déambulateur et de ses composantes pour s'assurer qu'il fonctionne comme prévu. N'utilisez pas le déambulateur si des composantes sont endommagées ou inutilisables. Demandez à un agent autorisé d'effectuer les réparations nécessaires et/ou le remplacement.

○ Poignée

Avec l'usage, le remplacement périodique de la poignée peut être nécessaire. Remplacez lorsque requis.

○ Système de freinage

Les freins devraient fonctionner à la fois en position de contrôle et en position stationnaire et les câbles devraient être intacts. Si ces fonctions de contrôle ne fonctionnent pas comme prévu, arrêtez immédiatement l'utilisation et faites réparer le déambulateur.

○ Ajustement de la hauteur

Assurez-vous qu'il fonctionne.

- **Marquage CE**
Assurez-vous que le marquage CE est présent et lisible.
- **Réflecteurs**
Assurez-vous que les réflecteurs sont toujours présents et visibles.
- **Mécanisme de pliage**
Assurez-vous qu'il fonctionne.
- **Roues**
Assurez-vous que les roues ne sont pas usées et qu'elles tournent facilement pour assurer au déambulateur un mouvement adéquat. Si vous entendez du bruit, faites inspecter le produit par un agent autorisé.
- **Fourches avant**
Assurez-vous que les roulements à billes sont fermement fixés et que les fourches se balancent facilement. Testez en balançant les deux roues au moins trois fois et jusqu'à dix fois. Il ne devrait pas y avoir plus de deux balancements de différence entre les deux roues lorsqu'elles se balancent entre 3 et 9 heures. Réglez l'inertie en remplaçant et en ajustant les vis de fourche M12x56.
- **Siège**
Vérifiez périodiquement que le mécanisme et les vis du siège sont bien en place. Si des composantes ne sont pas sécuritaires, ne vous asseyez pas sur le déambulateur et faites-le inspecter pour le réparer immédiatement. S'il est utilisé, assurez-vous que le coussin du siège est correctement monté en place pour un confort maximal.
- **Stabilité**
Les roues doivent toutes reposer fermement sur le sol et il ne doit pas y avoir de déformation du châssis.
- **Test de promenade**
Avant d'utiliser votre déambulateur, faites une petite promenade avec lui pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Revendeur autorisé / Agent de service

Dernière date d'entretien

L'utilisation prévue

Ce déambulateur a été conçu pour servir de support pendant la marche ou de siège de repos pendant qu'il est arrêté et verrouillé en place. Il ne devrait jamais être utilisé comme un moyen de transport. Ne jamais tenter de modifier le déambulateur de quelque manière que ce soit.

Remarque!

Le reconditionnement doit être effectué uniquement par un agent autorisé. Si effectué de manière incorrecte par une personne non autorisée, il pourrait entraîner un accident et/ou des blessures.

Pour trouver un agent autorisé, contactez votre bureau local:

Europe: info.se@humancaregroup.com

Canada: info.ca@humancaregroup.com

États-Unis: info.us@humancaregroup.com

Australie: info.au@humancaregroup.com

Pays-Bas: info.nl@humancaregroup.com

Lors du remplacement de pièces sur le déambulateur, utilisez uniquement des pièces autorisées par Human Care afin de garantir la validation CE continue.

Si la corrosion est plus qu'un simple film de rouille, jetez et recyclez le déambulateur conformément à la réglementation locale.

N'utilisez jamais ce déambulateur autrement que pour l'usage auquel il est destiné.

Il est fortement recommandé que votre thérapeute ou votre médecin évalue vos besoins avant d'utiliser ce produit.

Inspectez fréquemment votre déambulateur

avant de l'utiliser pour vous assurer qu'il n'a aucun dommage ni usure.

L'utilisateur ne doit pas dépasser la capacité pondérale de ce produit!


NeXus 3

200 kg/441lb

NeXus 3 Large

250kg/551lb

Remarque: les directives de maintenance peuvent varier d'un pays à l'autre. Assurez-vous que tout travail de maintenance effectué soit fait conformément aux normes locales obligatoires.

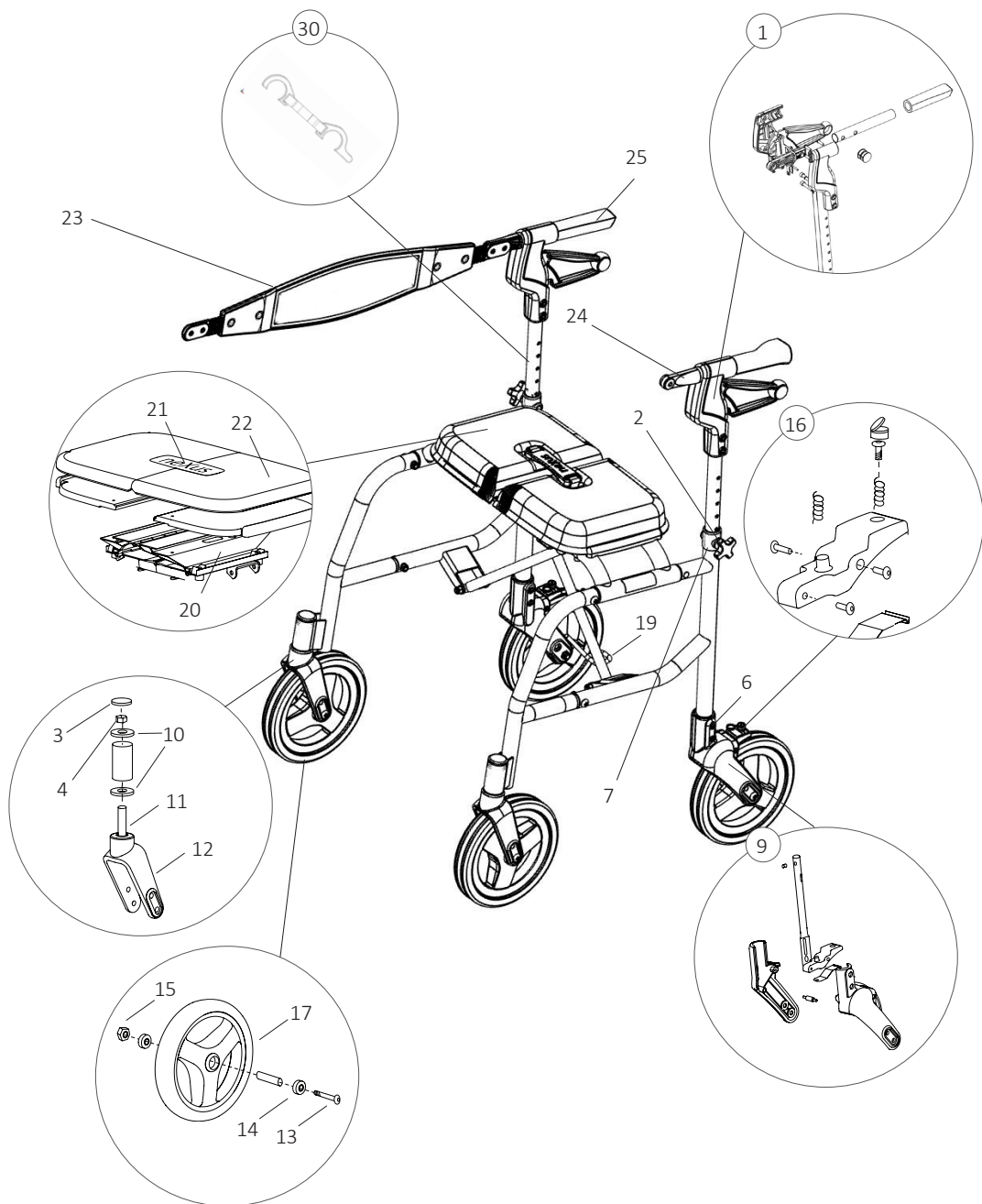

No	Désignation (Qté/Déambulateur)	UdeM	N° de pièce	Instructions additionnelles
1	Poignée de frein complet (1 requis/ch) Droit - boule rouge Gauche- boule rouge	Ch	93243 93201	Standard avec déambulateur
	Poignée de frein complet court (1 requis) Droit - boule rouge Gauche- boule rouge	Ch	93245 93244	Optionnel
2	Ensemble d'écrous à oreilles (2 requis) Écrous à oreilles Boulon	Ch	89096	Pour les modèles après 2009
3	Bouchon pour boulon	Ch	4823	
4	Écrou de fourche avant	Ch	H48025	
5	Écrou pour le tube de fourche arrière	Ch	H48031	
6	Vis pour le tube de fourche arrière	Ch	H48030	
7	Collier de réglage	Ch	P45004	
8	Ensemble de frein inférieur (2 requis) Gauche - Super bas Gauche - Bas Gauche - Standard Droit - Super bas Droit - bas Droit - Standard	Ch	93256 93257 93258 93259 93260 93261	
9	Ensemble de fourche arrière (2 requis) Gauche - Super bas Gauche - Bas Gauche - Standard Droit - Super bas Droit - bas Droit - Standard	Ch	AS48013 AS48015 AS48017 AS48014 AS48016 AS48018	Includes inner/outer fork, lower brake rod assembly, brake pad complete and cap)
10	Roulement de fourche avant (2 requis/fourche)	Ch	H48026	
11	Boulon de fourche avant	Ch	H48024	
12	Fourche avant	Ch	4825	
13	Boulon d'essieu	Ch	H48020	
14	Roulement de roue (2 requis/roue)	Ch	H48022	
15	Écrou d'essieu	Ch	H48021	

16	Plaquette de frein complet (2 requis) Vis de réglage (hexagonale) Ressort pour plaquette de frein Manchons pivotant de vis (2) Pivot en laiton Vis Vis de réglage Ressort de levier Lever Bouchon en laiton	Ch	76011	
17	Ensemble de roue, gris (4 requis) Roue Roulement (2/roue) Entretoise	Ch	93282-01	
17	Ensemble de roue, noir (4 requis) Roue Roulement (2/roue) Entretoise	Ch	93282-02	
18	Couvercle de vis (fourche arrière)	Ch	H45003	
19	Trottoir	Ch	4879	
20	Mécanisme du siège pliant	Ch	P45007	
21	Poignée du siège Rouge	Ch	P45008	
22	Rembourrage du siège (2 pc)	Ch	93263	
23	Dossier Complète Dossier Vis de dossier Écrou de dossier	Ch	90391*	*Pour le neXus 3 Large, l'article de numéro est: 94404.
24	Pince de dossier Droit Gauche	Ch	4880 4881	
25	Poignée	Ch	20-024	
26	Panier (pas illustré)	Ch	4510	
27	Kit de réparation de sac souple (remplacement)	Ch	90276	Inclus avec sac souple
28	Sac souple à fermeture éclair (complète)	Ch	93280*	Standard avec déambulateur *Pour le neXus 3 Large, l'article de numéro est: 94405
30	Bouton de verrouillage		73004	

Pour les modèles «4600» :

No	Designation (Qty/Déambulateur)	UdeM	N° de pièce	Instructions additionnelles
	Poignée de frein complet droit (1 requis) Régulier Grand	Ch	P48535 P48555	
	Poignée de frein complet gauche (1 requis) Régulier Grand	Ch	P48545 P48565	
	Ensemble de frein inférieur (2 requis) Gauche - Super bas Gauche - Bas Gauche - Standard Droit - Super bas Droit - bas Droit - Standard	Ch	76013 76016 76018 76015 76017 76019	

Pour les neXus 3 large modelles:

	Backstrap complete neXus Wide	Ch	94404	
	Soft Zippered bag complete neXus Wide	Ch	94405	

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B

117 60 Stockholm

Phone:- +46 8 665 35 00

E-mail: info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road

Ottawa, ON K2E 7K1

Phone:- 613.723.6734

Email: info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K

Austin, TX 78754

Phone: 512.476.7199

Email: info.us@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124

8076 PA Vierhouten

Phone: 0577-412171

Email: info.nl@humancaregroup.com

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.