



Support dorsal

Assise droite

Écartement des jambes

Polyester Net  
Art. Nr. 25045



Polyester  
Art. Nr. 25070



Soft Air Mesh  
Art. Nr. 25054



## Option de harnais de soutien

Nos harnais Basic s'adaptent au corps du patient et offrent un bon soutien pour tout le dos. Ils constituent un bon choix lorsqu'on ne sait pas qui utilisera le harnais. Ils sont disponibles en trois tissus pratiques pour s'adapter à la plupart des situations de levage.

### Trois choix de tissus

Le hamac Basic est confortable et disponible en trois tissus au choix : polyester, filet en polyester et filet en maille aérée. Les matériaux Soft Air Mesh et Polyester Net permettent à l'humidité et à la chaleur de se dissiper efficacement du patient, ce qui permet de laisser le harnais derrière le patient pendant une courte période après le transfert. Le tissu Polyester Net est souple, aéré et sèche rapidement, ce qui le rend adapté à une utilisation dans les environnements de baignade.

### Assise droite

Nos harnais Basic assurent un bon maintien de tout le dos, sans appui-tête, renforts ou rembourrages. Ils conviennent aux patients présentant un manque de stabilité du

tronc et sont particulièrement utiles pour assurer un positionnement correct lorsque le patient est placé dans un fauteuil ou un autre siège. Ils peuvent être utilisés avec une suspension à 2, 3 ou 4 points selon les besoins.

### Entretien et ajustement faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Ils sont dotés de sangles renforcées et d'une sangle en nylon très résistante autour de l'élingue pour les rendre suffisamment solides pour résister même à une utilisation très active. Chaque étiquette de harnais est codée par couleur pour garantir une sélection rapide et facile du harnais approprié et les sangles sont codées par couleur pour faciliter la détermination du positionnement requis.



Dispositifs d'aide  
à la marche



Lits médicaux



Solutions de levage



Hygiène



Sièges Convertibles

## Accessoires



### Boucles d'extension

Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties N° de pièce 90707



### Rembourrage et supports de jambe

Idéal pour les utilisateurs ayant la peau sensible ou souffrant de douleurs. No de pièce : 21146-S, M, L Supports renforcés. Taille unique. No de pièce 25102



### Housse rembourrée

Protège l'utilisateur de l'impact de la barre de suspension. Ne pas utiliser dans un environnement humide. No de pièce 50866



### Barres de suspension pour suspension à 2, 3 ou 4 points

Réf. no. 57551, 55764 (2 or 3-Point - dégagement rapide), 55619 (4 points - fixation au crochet de pied)

## Levage




### Utilisation vers/depuis un lit

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.




### Utilisation vers/depuis un fauteuil

Convient pour les transferts et les repositionnements vers/depuis un fauteuil. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.

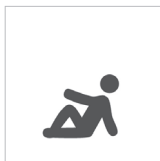

### Utilisation vers/depuis le sol

Adapté aux transferts depuis le sol.

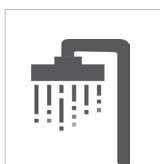

### Utiliser pour la douche


Seul le tissu Polyester Net peut être utilisé pour cette application.

## Soins et caractéristiques




### Filet en polyester

Matériau doux et mince qui respire et sèche rapidement. Idéal pour prendre un bain ou une douche.

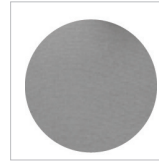


### Polyester

Matériau durable avec un faible coefficient de frottement, ce qui le rend facile à appliquer et à nettoyer. Équipé de poignées.

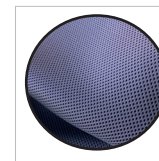

### Maille aérée douce

Matériau léger, frais et respirant. Convient aux peaux sensibles.

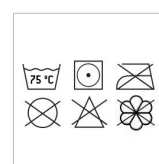


### Entretien

Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette. Utilisez un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.

## Spécifications techniques

Numéro d'article			Taille	Couleur	A	B	C
<b>Filet en polyester</b>	<b>Soft Air Mesh</b>	<b>Polyester</b>					
25045-JS	25054-JS	25070-JS	Junior Small	JS	22 cm / 8,7 po	62 cm / 24,4 po	50 cm / 19,7 po
25045-JM	25054-JM	25070-JM	Junior Medium	JM	28 cm / 11 po	65 cm / 25,6 po	54 cm / 21,3 po
25045-S	25054-S	25070-S	Small	S	35 cm / 13,8 po	77 cm / 30,3 po	58 cm / 22,8 po
25045-M	25054-M	25070-M	Medium	M	40 cm / 15,7 po	88 cm / 34,6 po	63 cm / 24,8 po
25045-L	25054-L	25070-L	Large	L	44 cm / 17,3 po	98 cm / 38,6 po	65 cm / 25,6 po
25045-XL	25054-XL	25070-XL	Extra Large	XL	48 cm / 18,9 po	102 cm / 40,2 po	70 cm / 27,6 po
25045-XXL	non disponible	25070-XXL	XX-Large	XXL	52 cm	108 cm	74 cm
Poids maximal de l'utilisateur : 300 kg / 660 lb							

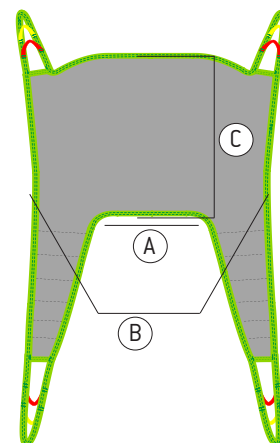

\* Disponible en longueurs assorties : 10 cm/3,9 po (21180-10), 15 cm/5,9 po (21180-15), 20 cm/7,8 po (21180-20), 25 cm/9,8 po (21180-25), 35 cm/13,7 po (21180-35)



Nous améliorons la liberté de mouvement  
et la qualité des soins aux personnes.

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)



#### HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00  
[humancaregroup.com](http://humancaregroup.com)

#### HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734  
[info.ca@humancaregroup.com](mailto:info.ca@humancaregroup.com)

#### HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
[info.nl@humancaregroup.com](mailto:info.nl@humancaregroup.com)

#### HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin, États-Unis  
+1 512 76 7199  
[info.us@humancaregroup.com](mailto:info.us@humancaregroup.com)