



Sans câble

Confortable et élégant

Trois couleurs



Notre meilleur vendeur

Le neXus 3 est notre déambulateur le plus vendu. Il est muni d'une large sangle arrière et de roues robustes, ce qui en fait un compagnon de vie quotidien parfait.

Facile à plier

Doté du tout premier cadre breveté pliant croisé, il établit la norme pour la conception des dispositifs d'aide à la marche du futur. Le déambulateur neXus 3 est équipé d'un cadre pliant croisé, ce qui le rend extrêmement facile à plier. Le sac souple à fermeture éclair se replie sans se détacher du déambulateur. Il peut rester indépendamment en position pliée lorsque le déambulateur en est muni. La conception à pliage croisé permet également au déambulateur de se plier partiellement pour passer dans des espaces encore plus étroits.

personnes ayant une dextérité manuelle limitée et permet à l'utilisateur d'appliquer/désengager les freins, en utilisant la paume de ses mains. La structure pliante croisée permet une ergonomie de marche supérieure en offrant un grand espace de marche. Le siège rembourré, profilé et matelassé offre un endroit de repos confortable. La sangle arrière peut être retournée pour permettre une position assise à deux positions ainsi qu'une aide visuelle pour obtenir une démarche optimale.

Frein anatomique et large sangle arrière

Les poignées de frein anatomiques et sans câble offrent une sécurité et un confort accrus. Ainsi, aucun câble ne s'accroche dans les objets du domicile. Le système de freinage sans câble assure également des années d'utilisation sans problème. L'anatomie et une bonne communication visuelle ont été au cœur de la conception des poignées de frein. Ils sont confortables, et la boule rouge est conçue pour les


Offert en noir, bleu et rouge

Le neXus 3 est offert en trois tailles différentes, soit le neXus 3 super bas (19"), le neXus 3 bas (22") et le neXus 3 standard (24")*. Tous les tailles sont offertes en noir, en bleu et en rouge (bourgogne).

**Les mesures sont prises du plancher au bas du siège.*



Caractéristiques

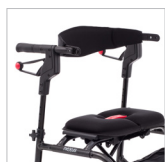


Dossier rembourré

Confort pour le dos de l'utilisateur assis. Peut être retourné dans les deux sens. Inclus avec le déambulateur.



Siège rembourré en mousse

Offre un endroit de repos confortable pendant la marche.

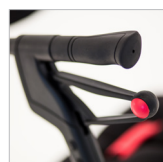

Poignées anatomiques de frein

Les poignées anatomiques de frein sont faciles à utiliser et confortables.

Accessoires



Panier rigide

Idéal pour les courses. Charge maximale 4,5 kg/10 lb. N° de pièce 4510.



Plateau

Pratique pour poser des articles légers. Charge maximale 2 kg/4,4 lb. N° de pièce 93316.




Dispositif d'aide pour gravir les bordures

Permet au déambulateur de monter sur un trottoir. N° de pièce 93315.




Porte-canne ou parapluie

Simplifie le transport d'une canne ou d'un parapluie. N° de pièce 93317.

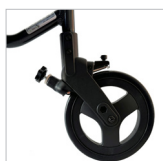

Frein de ralentisseur

Permet de contrôler la vitesse de marche. Livré par paire. N° de pièce. 93122.

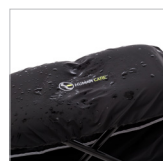

Housse de siège

Housse de siège imperméable et facile à fixer au siège. N° de pièce. 93313.



Porte-gobelet

Se fixe en quelques secondes sans outils. Convient aux bouteilles et gobelets de taille standard. N° de pièce 90394.



Étiquette d'identification Canada

Se fixe au déambulateur en quelques secondes. N° de pièce 90392.



Sac souple à fermeture éclair

Sac souple qui se plie avec l'aide à la mobilité. Capacité maximale 5 kg/11 lb. N° de pièce 93312.

Spécifications techniques

Nom de la pièce	N° de la pièce	Hauteur de la poignée (Min. – Max.)	Hauteur du siège	Largeur totale	Largeur entre les poignées	Distance entre les roues arrière	Taille de la roue	Poids du produit	Poids maximal de l'utilisateur
neXus 3 Super Bas Noir Bleu Rouge (bourgogne)	470018* 470018B 470018R	78cm - 86cm / 30.5" - 34.1"	48cm / 19"	58cm / 23"	45cm / 17.5"	47cm / 18.5"	20cm x 3cm / 8" x 1.2"	8.39 kg / 18.5lb	200 kg / 441 lb
neXus 3 Bas Noir Bleu Rouge (bourgogne)	470022 470022B 470022R	78cm - 93cm / 30.5" - 36.5"	56cm / 22"	58cm / 23"	45cm / 17.5"	47cm / 18.5"	20cm x 3cm / 8" x 1.2"	8.48 kg / 18.7lb	200 kg / 441 lb
neXus 3 Standard Noir Bleu Rouge (bourgogne)	470024 470024B 470024R	83cm - 101cm / 32.5" - 39.8"	61cm / 24"	58cm / 23"	45cm / 17.5"	47cm / 18.5"	20cm x 3cm / 8" x 1.2"	8.62 kg / 19.0lb	200 kg / 441 lb
neXus 3 Bas Large Noir	479022	78cm - 93cm / 30.5" - 36.5"	56cm / 22"	67cm / 26.4"	53cm / 20.9"	56.5cm / 22.2"	20cm x 3cm / 8" x 1.2"	8.4 kg / 18.5lb	250kg / 551lbs
neXus 3 Standard Large Noir	479024	83cm - 101cm / 32.5" - 39.8"	61cm / 24"	67cm / 26.4"	53cm / 20.9"	56.5cm / 22.2"	20cm x 3cm / 8" x 1.2"	9 kg / 19.8lb	250kg / 551lbs

* N° de la pièce 470018S (neXus 3 Super Bas Noir) peut être équipé d'un kit de poignée différent pour abaisser la hauteur de la poignée à 27,5"-30,5".



Noir



Bleu



Rouge

„ Nous améliorons la liberté de mouvement
et la qualité des soins pour les gens.