

Toileting Sling E-clip



Dos rembourré

Soutien doux des aisselles

Grande ouverture



Idéal pour aller aux toilettes

Le fait d'enfiler des bas sans difficulté et facilement peut être un défi et s'accompagne souvent d'une certaine pression due au temps, surtout après être allé aux toilettes. Notre harnais E-clip pour la toilette offre une solution pratique à de nombreux clients et à leurs soignants.



Transferts confortables

Grâce à l'ouverture relativement grande sous le siège du client et au repose-jambes extra long et rembourré, il est possible d'enlever les sous-vêtements pendant que le client porte le harnais. Cette sangle est dotée d'un dos renforcé et d'un rembourrage doux sous les bras pour offrir un soutien efficace et confortable au client pendant le transfert, qui s'effectue principalement en position assise. Ce harnais peut également être utilisé pour soulever un client d'un fauteuil roulant étroit et le transférer dans un siège moulé ou dans une baignoire/douche.

haut dispose également d'un support de nuque réglable, qui peut également servir d'appui-tête grâce à ses sangles réglables. L'appui-tête est un ajout bienvenu pour les clients qui ont tendance à trop s'étirer ou qui ont des problèmes de stabilité du tronc ou de la tête.

Flexible et aéré

Le matériau en maille polyester a un faible coefficient de frottement et est facile à appliquer. Le harnais sèche également rapidement après le lavage ou le bain. La matière possède des propriétés élastiques légères et s'adapte à la morphologie du client. Le client n'a pas besoin de porter le harnais aussi longtemps. Ce harnais a été conçu pour une suspension à quatre points à partir d'une barre de suspension. Compatible avec l'élévateur mobile Diana II Comfort et Diana II 4 MSB.

La bonne position pour aller aux toilettes

En fixant cette sangle à une barre de suspension, cette sangle peut aider les clients à adopter une posture parfaite pour aller aux toilettes. Le harnais toilette



Dispositifs d'aide
à la mobilité



Lits de soins
de santé



Solutions de levage



Hygiène



Fauteuils de transfert
convertibles

Accessoires



Barre de suspension à 4 points

Pour l'élévateur monté au plafond HeliQ, disponible en petit (manuel), moyen et grand (électrique). N° d'art. 92441, 92442 et 92443.



Barre de suspension à 4 points

Pour Diana II Comfort 4ESB (électrique). N° d'art. 90560.



Barre de suspension à 4 points

Pour Diana II/ Diana II Comfort 4MSB (manuel), n° art. 90558/ 90559.

Usage




De et vers le lit

Convient pour soulever les clients du lit et les aider à s'asseoir sur le lit.




De et vers une chaise

Convient pour le positionnement dans un fauteuil et pour les transferts vers et depuis un fauteuil.

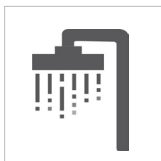

Douche


Le matériau en maille de polyester convient parfaitement aux environnements humides.

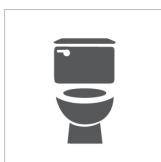

Toilettes

Fournit un soutien supplémentaire lorsque vous utilisez les toilettes.

Caractéristiques

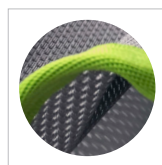


Filet en polyester

Un matériau doux et mince qui respire et sèche rapidement. Idéal pour les conditions humides, comme le bain et la douche.



Verrouillage intégré e-clip

Peut être utilisé d'une seule main. Universellement compatible avec tous les élévateurs équipés d'attaches champignon Ø 6,8-8,2 mm.

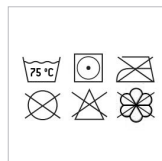


Instructions de nettoyage et d'entretien

Pour les instructions de nettoyage et d'entretien, consultez l'étiquette. Lavez dans un sac à lessive approuvé.


Spécifications techniques

Noms de produits	Numéro d'article	Taille	Couleur	A	B	C
Toileting Sling E-clip Net JM	25085C-JM	Junior Medium	JM	28 cm / 11 po	73 cm / 28,7 po	26 cm / 10,2 po
Toileting Sling E-clip Net S	25085C-S	Small	S	32 cm / 12,6 po	82 cm / 32,3 po	30 cm / 11,8 po
Toileting Sling E-clip Net M	25085C-M	Medium	M	48 cm / 18,9 po	90 cm / 35,4 po	33 cm / 13 po
Toileting Sling E-clip Net L	25085C-L	Large	L	50 cm / 19,7 po	98 cm / 38,6 po	33 cm / 13 po
Toileting Sling E-clip Net XL	25085C-XL	Extra Large	XL	56 cm / 22 po	101 cm / 39,8 po	38 cm / 15 po
Toileting Sling E-clip Soft JS	25091C-JS	Junior Small	JS	29 cm / 11,4 po	76 cm / 29,9 po	68 cm / 26,8 po
Toileting Sling E-clip Soft JM	25091C-JM	Junior Medium	JM	32 cm / 12,6 po	82 cm / 32,2 po	72 cm / 28,3 po
Toileting Sling E-clip Soft S	25091C-S	Small	S	42 cm / 18,8 po	92 cm / 32,3 po	74 cm / 29,1 po
Toileting Sling E-clip Soft M	25091C-M	Medium	M	44 cm / 17,3 po	97 cm / 38,2 po	80 cm / 31,5 po
Toileting Sling E-clip Soft L	25091C-L	Large	L	49 cm / 19,3 po	98 cm / 38,6 po	85 cm / 33,5 po
Toileting Sling E-clip Soft XL	25091C-XL	Extra Large	XL	74 cm / 29,1 po	101 cm / 50 po	98 cm / 38,6 po

Poids maximum de l'utilisateur : 300 kg / 660 lb

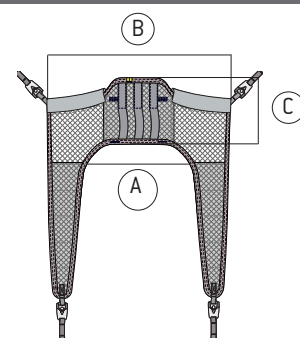

25085C

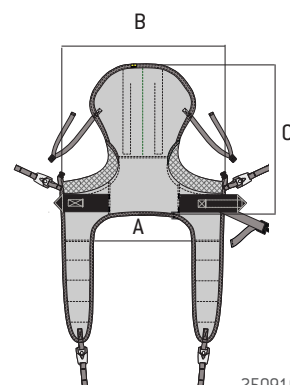

25091C



Nous améliorons la liberté de mouvement
et la qualité des soins aux personnes.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
humancaregroup.com

HUMAN CARE ALLEMAGNE

Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
Courriel : info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin, États-Unis
+1 512 76 7199
Courriel : info.us@humancaregroup.com