

General Purpose Sling



Modèles à usage
unique ou
réutilisables
Boucle ou pince



Nos harnais à usage polyvalent ont une capacité de charge élevée et une largeur totale généreuse pour offrir une position assise étirée bien adaptée au levage d'utilisateurs plus lourds dans toutes les situations. Le repose-tête intégré permet de soulever le patient même à partir du sol. Le harnais est disponible en SPU et réutilisable, avec clips et avec boucles.

Deux options pratiques

Le harnais polyvalent est disponible soit avec des boucles renforcées qui garantissent la durabilité et la facilité d'utilisation, soit avec des clips pour une fixation facile et sûre. L'une ou l'autre de ces options constitue une solution idéale en cas de changement soudain de poste. Ces harnais sont disponibles dans les tailles adultes Small à Extra Large et peuvent supporter une capacité maximale de 318kg/700lb.

Favorise la prévention des infections

Les harnais à usage unique (SPU) offrent l'option pratique d'une mise au rebut après utilisation, associée à l'avantage supplémentaire du contrôle de l'hygiène.

Comme le harnais ne peut être utilisé que par un seul patient à la fois, les protocoles de contrôle des infections de l'établissement sont facilement respectés.

Caractéristiques optimales

Ces harnais sont dotés de jambières divisées et d'un dossier haut pour un soutien accru. Ils sont fabriqués à partir d'un mélange de polyester et de coton à la fois solide et doux et sont idéaux pour un transfert en position assise, horizontale ou semi-allongée. Le matériau unique élimine les fluides et peut être laissé derrière le patient. Le modèle no NBS-104 peut être utilisé avec un palonnier. Le modèle no NSB-105 comporte des boucles qui peuvent être attachées à une barre de suspension à 2, 3 ou 4 points.



Accessoires



Boucles d'extension

Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties N° de pièce 90707



Rembourrage des jambes

Supports rembourrés doux pour les jambes. Idéal pour les utilisateurs ayant la peau sensible ou souffrant de douleurs. Peau de mouton synthétique. No de pièce : 21146-S, M, L



Barre de montage

Pour le modèle NSB-105 (harnais à attaches boucles). Pour une suspension à 2, 3 ou 4 points.



Barre d'écartement

Palonnier motorisé Pour les modèles NSB-103C et NSB-104C (harnais à clips/attaches).

Levage



Utilisation vers/depuis un lit

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



Utiliser vers/depuis une chaise

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un siège. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



Utilisation vers/depuis le sol

Adapté aux transferts depuis le sol.



Modèle à usage unique

Le harnais est destinée à être utilisé par un seul patient à la fois. Jeter après utilisation.

Soins et caractéristiques




Harnais à clip ou à boucle

Deux options de fixation pratiques - clips ou harnais à boucle.



Boucles renforcées

Boucles renforcées à code de couleur pour déterminer facilement le positionnement requis.

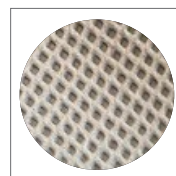


Polypropylène non tissé

Le matériau permet aux fluides de s'évacuer du patient. Ne pas laver. Usage unique.



Spécifications techniques

Numéro d'article		Taille	Couleur	A	B	C
NSB-103C-S	Harnais à usage général avec clips	Small	S	30 cm / 12 po	84 cm / 33 po	78 cm / 31 po
NSB-104C-S	Harnais à usage général avec clips SPU					
NSB-103C-M	Harnais à usage général avec clips	Medium	M	43 cm / 17 po	88 cm / 35 po	97 cm / 38 po
NSB-104C-M	Harnais à usage général avec clips SPU					
NSB-103C-SL	Harnais à usage général avec clips	Large	L	53 cm / 21 po	103 cm / 41 po	114 cm / 45 po
NSB-104C-L	Harnais à usage général avec clips SPU					
NSB-103C-XL	Harnais à usage général avec clips	Extra Large	XL	68 cm / 27 po	114 cm / 45 po	133 cm / 53 po
NSB-104C-XL	Harnais à usage général avec clips SPU					
NSB-105-S	Boucles de harnais à usage général SPU	Small	S	30 cm / 12 po	84 cm / 33 po	78 cm / 31 po
NSB-105-M	Boucles de harnais à usage général SPU	Medium	M	43 cm / 17 po	88 cm / 35 po	97 cm / 38 po
NSB-105-L	Boucles de harnais à usage général SPU	Large	L	53 cm / 21 po	103 cm / 41 po	114 cm / 45 po
NSB-105-XL	Boucles de harnais à usage général SPU	Extra Large	XL	68 cm / 27 po	114 cm / 45 po	133 cm / 53 po
Poids maximum de l'utilisateur : 318kg/700lb						

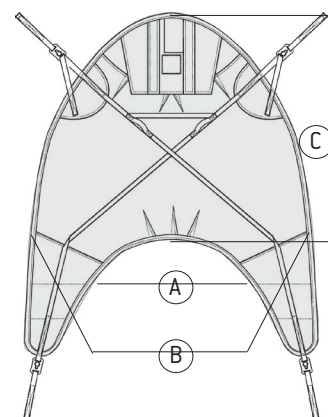

L'illustration montre le modèle NSB-104C
Harnais polyvalent avec clips - SPU

HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
Courriel : info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin, États-Unis
+1 5 124 76 7199
Courriel : info.us@humancaregroup.com