



Facile à régler  
et à plier  
Conception moderne

## Un compagnon de marche intelligent et attrayant

Le Crossover est le plus récent ajout à notre gamme de déambulateurs. En plus d'être doté de fonctions intelligentes, sa conception est élégante et conçue pour les personnes à la recherche d'un style de vie actif, soutenu par un déambulateur stable.

Le Crossover se plie très facilement, ce qui le rend idéal lorsque vous voyagez ou pour le ranger dans un espace étroit. Il suffit de tirer la sangle rouge à l'arrière du siège pour le plier. Le panier du Crossover en filet souple se plie également facilement avec le déambulateur. Si le panier est rempli, il peut être rapidement retiré avant de le plier. Il est tout aussi facile de l'enlever que de le mettre en place.

Il est également livré avec un dispositif d'aide pour gravir les bordures intelligent pouvant être placé du côté gauche ou droit. Grâce à lui, vous pourrez facilement relever l'avant du déambulateur pour monter sur les trottoirs sans effort. Par mesure de sécurité supplémentaire, nous avons également ajouté des réflecteurs près des roues avant, de

sorte que les voitures vous voient lorsque vous traverserez la rue. Si vous souhaitez vous asseoir pour vous reposer, le large dossier rembourré offre un soutien confortable. Le siège peut également être équipé d'un rembourrage supplémentaire si vous utilisez le Crossover pour vous asseoir pendant de plus longues périodes.

En appuyant sur les boutons rouges du cadre, vous pouvez facilement ajuster la hauteur du Crossover pour l'adapter à vos besoins.

Nous espérons que vous apprécierez autant que nous de cette aide à la marche exceptionnelle. Nous sommes convaincus que ce compagnon stable pensé dans les moindres détails vous accompagnera dans toutes vos promenades.



## Caractéristiques



### Dossier rembourré

Le dossier rembourré offre un soutien confortable pour le dos de l'utilisateur assis.



### Dispositif d'aide pour gravir les bordures

Grâce au dispositif d'aide pour gravir les bordures, le déambulateur peut surmonter des obstacles plus facilement.



### Poignées anatomiques de frein


Les poignées anatomiques de frein sont faciles à utiliser et confortables.



### Panier en filet souple

Panier pliable, parfait pour ranger des objets lorsque vous sortez marcher.

## Accessoires

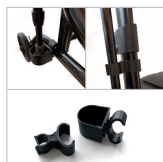

### Porte-canne

Simplifie le transport d'une canne ou d'un parapluie. Le porte-canne est très facile à fixer. N° de pièce 90230.



### Étiquette d'identification verte

Se fixe au déambulateur en quelques secondes. N° de pièce 90393.



### Frein ralentisseur

Empêche le déambulateur de rouler trop vite et permet un contrôle de la vitesse de marche. N° de pièce 90231.



### Étiquette d'identification Canada

Se fixe au déambulateur en quelques secondes. N° de pièce 90392.



### Coussins rembourrés en mousse

Des coussins sont placés sur le siège pour créer une surface plus confortable et plus agréable sur laquelle s'asseoir. N° de pièce 90232.

## Spécifications techniques

Nom de la pièce	N° de la pièce	Hauteur de la poignée (Min. – Max.)	Hauteur du siège	Largeur totale	Largeur entre les poignées	Taille de la roue	Poids du produit
Crossover Z1	90222	86 – 98,5 cm 33,8 - 38,85 po	53 cm 21 po	66 cm 26 po	48 cm 19 po	20 cm 7,8 po	8 kg 17 lb

Poids maximal de l'utilisateur : 136 kg/300 lb

*Nous améliorons la liberté de mouvement  
et la qualité des soins pour les gens.*



HUMAN CARE SUÈDE (Siège social)

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723-6734  
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin  
+1 512 476-7199  
info.us@humancaregroup.com