


Low Basic Sling

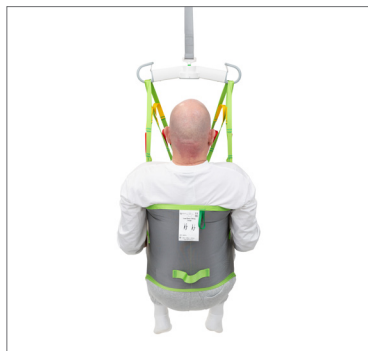

Notre harnais Low Basic Sling est une bonne solution pour les utilisateurs qui ont une bonne stabilité du torse et un bon contrôle du haut du corps. Sa conception est similaire à celle du harnais Basic, mais son support dorsal est plus petit. Le Low Basic Sling offre un soutien à partir du coccyx, sous les bras et sous les jambes. Les bras peuvent être gardés à l'intérieur, mais sont le plus souvent gardés à l'extérieur du harnais. Ce harnais est parfait pour un utilisateur plus actif. Le Low Basic est conçu pour les suspensions à deux, trois et quatre points.

Deux tissus

Le Low Basic Sling est un harnais confortable qui est disponible en deux tissus - Polyester et Filet de Polyester. Les matériaux du Polyester Net permettent un transfert efficace de l'humidité et de la chaleur du patient, ce qui permet de laisser le harnais derrière le patient pendant une courte période après la fin du transfert. Le tissu Polyester Net est souple, aéré et sèche rapidement, ce qui le rend adapté à une utilisation dans les environnements de baignade.

Assise droite

Notre harnais Low Basic offre un soutien permettant au patient d'avoir les bras à l'extérieur du harnais. Il est indiqué pour les patients dont le tronc est stable et qui s'assoient en position verticale, ce qui est

particulièrement utile pour assurer un bon positionnement du patient lorsqu'il est assis dans un fauteuil ou un autre type de siège. Ils peuvent être utilisés avec une suspension à 2, 3 ou 4 points selon les besoins.

Entretien et ajustement faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Ils sont dotés de sangles renforcées et d'une sangle en nylon très résistante autour de l'élingue pour les rendre suffisamment solides pour résister même à une utilisation très active. Chaque étiquette de harnais est codée par couleur pour garantir une sélection rapide et facile du harnais approprié et les sangles sont codées par couleur pour faciliter la détermination du positionnement requis.



Dispositifs d'aide
à la marche



Lits médicaux



Solutions de levage



Hygiène



Fauteuils de transfert
convertibles

Accessoires



Boucles d'extension

Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties N° de pièce 90707



Rembourrage et supports de jambe

Idéal pour les utilisateurs ayant la peau sensible ou souffrant de douleurs. No de pièce : 21146-S, M, L Supports renforcés. Taille unique. No de pièce 25102



Housse rembourrée

Protège l'utilisateur de l'impact de la barre de suspension. Ne pas utiliser dans un environnement humide. No de pièce 50866



Barres de suspension pour suspension à 2, 3 ou 4 points

Réf. no. 57551, 55764 (2 or 3-Point - dégagement rapide), 55619 (4 points - fixation au crochet de pied)

Levage




Utilisation vers/depuis un lit

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.




Utilisation vers/depuis un fauteuil

Convient pour les transferts et les repositionnements vers/depuis un fauteuil. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.

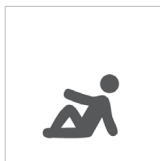

Utilisation vers/depuis le sol

Adapté aux transferts depuis le sol.

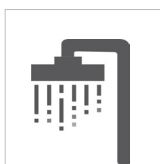

Utiliser pour la douche


Seul le tissu Polyester Net peut être utilisé pour cette application.

Soins et caractéristiques




Filet en polyester

Matériau doux et mince qui respire et sèche rapidement. Idéal pour prendre un bain ou une douche.

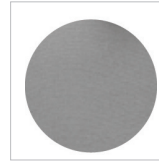

Polyester

Matériau durable avec un faible coefficient de frottement, ce qui le rend facile à appliquer et à nettoyer. Équipé de poignées.

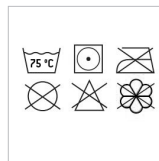


Entretien

Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette. Utilisez un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.

Spécifications techniques

Numéro d'article		Taille	Couleur	A	B	C
Filet en polyester	Polyester					
25047-JS	25072-JS	Junior Small	JS	22 cm / 8,7 po	65 cm / 25,6 po	30/11,8 po
25047-JM	25072-JM	Junior Medium	JM	28 cm / 11 po	71 cm / 28 po	37 cm / 14,6 po
25047-S	25072-S	Small	S	35 cm / 13,8 po	83 cm / 32,7 po	42 cm / 16,5 po
25047-M	25072-M	Medium	M	40 cm / 15,7 po	94 cm / 37 po	43 cm / 16,9 po
25047-L	25072-L	Large	L	44 cm / 17,3 po	104 cm / 40,9 po	45 cm / 17,7 po
25047-XL	25072-XL	Extra Large	XL	48 cm / 18,9 po	108 cm / 42,5 po	48 cm / 18,9 po
25047-XXL	25072-XXL	Extra Extra Large	XXL	52 cm / 20,5 po	111 cm / 43,7 po	52 cm / 20,5 po
Poids maximal de l'utilisateur : 300 kg / 660 lb						

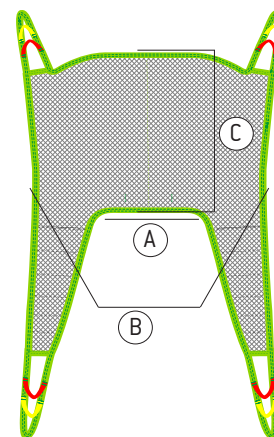

* Disponible en longueurs assorties : 10 cm/3,9 po (21180-10), 15 cm/5,9 po (21180-15), 20 cm/7,8 po (21180-20), 25 cm/9,8 po (21180-25), 35 cm/13,7 po (21180-35)



Nous améliorons la liberté de mouvement
et la qualité des soins aux personnes.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
Courriel : info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin, États-Unis
+1 512 76 7199
Courriel : info.us@humancaregroup.com