

Cosmos

Innovation et simplicité vont de pair.



reddot winner 2024



Double fonctionnalité

- peut être utilisé à la fois comme lève-personne suspendu portable et fixe



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.



red*dot* winner 2024

« La conception bien pensée du lève-personnes suspendu Cosmos simplifie les tâches quotidiennes effectuées par les aidants. »

- Jury du prix Red Dot de la meilleure conception

- Facile à installer
- Batterie au lithium
- La conception modulaire à l'intérieur permet un remplacement des pièces rapide et simple.
- Compatible avec plusieurs systèmes de rails existants
- Élaboré selon la plus récente norme ISO, ISO 10535:2021.
- Optimisé pour le stockage et l'expédition



Petit et léger avec une poignée intégrée, ce qui le rend facile à transporter.

Le Cosmos a été conçu pour être utilisé dans des environnements humides et mouillés. L'unité centrale a une très haute résistance à l'humidité (IP25) et le contrôle manuel est entièrement résistant à l'eau (IP27).



Un système de connexion rapide unique permet de fixer et de détacher facilement le lève-personne du rouleau du rail et de changer les barres de montage du Cosmos.



Visionnez la vidéo ici :





Innovation et simplicité vont de pair.

Notre plus récent lève-personnes suspendu, le Cosmos, a été conçu et développé en misant sur une qualité supérieure, la réduction du coût de possession et la facilité d'utilisation. Nous avons fait appel à de nombreux intervenants, comme des aidants, des clients, des techniciens de maintenance et des gestionnaires, pour veiller à ce que le produit réponde à tous leurs besoins respectifs. Ce nouveau lève-personnes est léger et compact et offre une double fonctionnalité, pouvant à la fois être portable et fixe: c'est simple et efficace.

Le lève-personnes Cosmos présente une conception scandinave moderne s'adaptant à une vaste gamme de milieux de soins et s'intègre facilement avec les couleurs du plafond.

Si vous souhaitez l'utiliser dans une autre pièce, vous pouvez facilement le transporter grâce à sa poignée et son poids léger de 6kg [13lb]. Pour passer du mode fixe au mode portable, c'est rapide et facile: il suffit de retourner l'appareil! Sa facilité de déplacement et sa double fonctionnalité permettent de réduire le nombre de lève-personnes suspendus nécessaires dans une installation et d'ainsi réaliser des économies.

Le Cosmos peut être utilisé dans des environnements humides tels que la douche et le bain. L'unité centrale a une très haute résistance à l'humidité [IP25]. Le contrôle manuel est entièrement résistant à l'eau [IP27], ce qui signifie que vous pouvez l'immerger dans une baignoire remplie d'eau sans affecter son fonctionnement. En outre, le contrôle manuel est conçu de manière intuitive, avec seulement quelques boutons et des indicateurs clairs pour le niveau de la batterie, les besoins d'entretien et les avertissements.

À l'intérieur du lève-personnes se trouve une batterie au lithium puissante et durable qui peut être facilement

chargée par le contrôle manuel, que ce soit par le câble ou le support de charge. La recharge dans le rail est disponible en option, selon le numéro d'article du produit choisi.

Human Care offre une large gamme de rouleaux de rail qui peuvent être combinés avec le lève-personnes Cosmos, ce qui lui permet de s'adapter aux rails d'autres fabricants. Cela signifie que vous pouvez garder vos rails actuels lorsque vous passez à une nouvelle flotte de lève-personnes Cosmos. Vous pouvez également choisir parmi une variété de barres de montage afin de les combiner avec la toile la plus appropriée pour votre client.

Tous les aspects du Cosmos ont été conçus dans un souci de sécurité et de qualité pour le client, l'aidant et les techniciens de maintenance. Il répond aux plus récentes normes de sécurité et est facile à utiliser. Les techniciens de maintenance apprécieront sa facilité d'entretien, car tous ses composants internes sont facilement accessibles. Sa conception modulaire permet un remplacement des pièces rapide et simple. Il est facile de vérifier l'état du lève-personnes grâce à son application.

En offrant un produit intuitif, portable, facile à entretenir et doté d'une double fonctionnalité, nous avons réduit au minimum le coût total de possession.



Lève-personnes

Cosmos 150, SWL; 150kg/330lb
Cosmos 220, SWL; 220kg/484lb
Cosmos 272, SWL; 272kg/600lb

N° d'article: 56100 ou 56105 (IRC) - (Code du pays*)
N° d'article: 56110 ou 56115 (IRC) - (Code du pays*)
N° d'article: 56120 ou 56125 (IRC) - (Code du pays*)

SWL=Capacité de levage, max, IRC = Recharge dans le rail


Spécifications, tous les modèles

Dimensions (La x H x Lo)	28,3cm x 15,4cm x 24,4cm, 11po x 6po x 9,6po
Poids	6kg/13lb
Longueur de la ceinture	215cm/ 84,6po
Batterie	25.2V DC 4.8Ah (1x), Lithium-Ion
Chargeur de batterie	GlobTek GTM96605-G2**** (100-240 V, 50-60 Hz, 1,5 A)

Accessoires (commandés séparément)



2 points

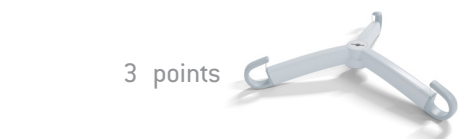

3 points



4 points



Rouleau du rail



Adaptateur de rouleau du rail



Crochet de connecteur



Boucle de connecteur



Sangle



Cosmos Trolley,
art nr 70347

Barres de montage

2 points	La : 35cm/13,8po La : 45cm/17,7po La : 55cm/21,7po	N° d'article : 56160 N° d'article : 56170 N° d'article : 56180
3 points	La/Lo : 48cm/18,9po	N° d'article : 56190
4 points	La:55cm * Lo:37cm/ La:21,7po * Lo :14,6po	N° d'article : 56195

Rouleaux de rail

Rouleau du rail	N° d'article : 56200
Rouleau du rail - Recharge dans le rail	N° d'article : 56202
Adaptateur de rouleau du rail**	N° d'article : 56201
Crochet de connecteur pour autres rouleaux de rail	N° d'article : 56203
Boucle de connecteur pour autres rouleaux de rail	N° d'article : 56204 (long) N° d'article : 56204 (court)

Sangles

Permet d'utiliser le lève-personnes à une hauteur inférieure. Offert en 9 longueurs différentes. Autres longueurs disponibles sur demande.	Lo : 20cm/7,9po Lo : 30cm/11,8po Lo : 40cm/15,7po Lo : 50cm/19,7po Lo : 60cm/23,6po Lo : 70cm/27,6po Lo : 80cm/31,5po Lo : 90cm/35,4po Lo : 100cm/39,4po	N° d'article : 94042-200 N° d'article : 94042-300 N° d'article : 94042-400 N° d'article : 94042-500 N° d'article : 94042-600 N° d'article : 94042-700 N° d'article : 94042-800 N° d'article : 94042-900 N° d'article : 94042-1000
--	--	---



* Codes de pays : AU-Australie, GB-Grande-Bretagne, EU-Europe, JP-Japon, NA-Amérique du Nord,

** À utiliser avec les rouleaux de rail de Human Care développés pour d'autres systèmes de rail.